


气动冲刀

气动冲刀可精确地切出长方形，正方形或圆形纸张取样（面纸或芯纸），精度达 $\pm 0.1\text{mm}$ ，用于评价纸的张力，定量，CMT/瓦楞芯平压，RCT/环压，CCT/瓦楞压溃等测试。

- 操作简单
- 迅速、精确
- 透明安全保护罩(CE)
- 结构牢固



T-6798

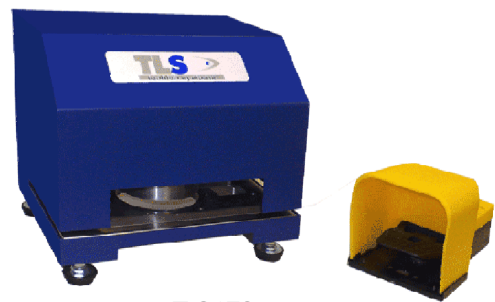


T-3170

| | |
|---------|-------------------------------|
| T- 3169 | 152.4 x 12.7 mm - 纸 |
| T- 3170 | 100 或 50 cm ² - 纸 |
| T- 3171 | 100 或 50 cm ² - 纸巾 |
| T- 6798 | 200 x 200 mm - 纸 |
| T- 6844 | DIN A4(210 x 297mm) - 纸 |
| T- 6844 | LETTER 8.5 x 11 inches - 纸 |

可选项: 按键双脉冲信号催动

气动冲刀的操作由气动的脚踏开关控制，加上进行切纸时的有机玻璃保护罩.准确地切出高精度的样办.切出的样办因重力掉到机器下部空位.

*****本切刀设计用于切面纸或芯纸的,如是其它的材料,材质或样办需要特别说明*****

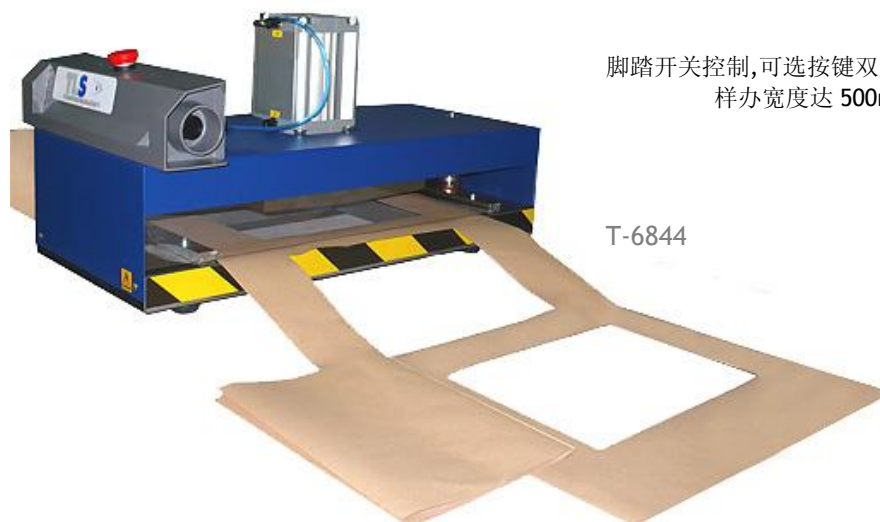

脚踏开关控制,可选按键双脉冲信号催动.
样办宽度达 500mm

T-6844

尺寸和重量,以 T-6798 为例:
产品尺寸: 240 x 260 x 360 mm (W x D x H)
运输包装尺寸: 430 x 550 x 610 mm (W x D x H)
净重/毛重: 40 Kg / 62 Kg

交付包括:
> Pneumatic DIE CUTTER PRESSE + foot switch I
CONNECTIONS
> Compressed air: 600 kPa